



массажер для плеч и спины

ТАППИНГ



Инструкция по эксплуатации



Производство и разработка
Компания «Витал Райз» (Россия)
Изготовлено в КНР

г. Краснодар, Россия, 350039,
ул. Круговая, 26.
www.vital-rays.com
8-800-500-88-18

KYJ-MA-JA

* ISO9001 Certified Manufacturer

Благодарим Вас за покупку массажного устройства компании «Витал Райз»

Перед использованием устройства, убедительная просьба тщательно ознакомиться с инструкцией, для применения правильных методов в использовании, особенно примите к сведению раздел о безопасности. Данная инструкция является вашим руководством по безопасности и эффективной эксплуатации.

VITAL RAYS

ВСТУПЛЕНИЕ

Массажер включает в себя методики традиционного массажа и современные технологии. Специально встроенный модуль позволяет легко выбрать нужный режим с различным уровнем интенсивности. Массажер оснащен специальной теплостойкой кожей.

- Массажер является универсальным прибором для осуществления постукивающего массажа любой части тела;
- Массажер очень прост в использовании и, благодаря небольшому весу, является портативный прибором;
- Уникальные встроенные программы позволяют быстро выбрать нужный режим и уровень интенсивности;
- Согласно принципам Китайской Медицины, постукивающий массаж может улучшить кровообращение, поток «qi», очистить сосуды, очистить организм от токсинов, снять боль и слабость. Регулярное использование может улучшить функции нервной системы, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, укрепить иммунитет, восстановить активность клеток, повысить обмен веществ.

Технические Характеристики:

Напряжение питания: переменное 220 в

Частота: 50 гц.

Потребляемая мощность: 150 вт.

Количество режимов: 39.

Уровни интенсивности: 9.

Время сеанса: 10 минут.

ФУНКЦИИ

1. Авто таймер: Выключается автоматически после 10 мин;
2. Регулятор интенсивности: 9 уровней интенсивности;
3. Выбор режима: возможность выбора режима (39 разных режимов массажа)
4. Надежный и безопасный: встроенный механизм от перегрева;
5. Удобный, возможность использования на любой области тела.

 ЗАПРЕЩЕНО - РАБОТА С МАССАЖЕРОМ В СЛУЧАЕ ВЛАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ

ЭФФЕКТ

1. Возможность эффективного снятия болевых ощущений в области шеи, плеч, спины и ног;
2. Снимает напряжение мышц, эффективно снимает боль;
3. Регулирует функции нервной, иммунной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системы;
4. Регенерирует активность клеток, улучшает обмен веществ;
5. Антицеллюлитный эффект.

ПРИНЦИП МАССАЖЕРА

Усталость и болевые ощущения являются следствием проблем кровообращения, а также накопления вредных веществ. Массажер может улучшить кровообращение, снять напряжение спазмированных мышц шеи, плеч и спины, и как следствие - улучшить кровообращение головного мозга.

Использование постукивающего массажа в области бронхов позволит эффективно освободиться от мокроты. Благодаря универсальному использованию массажера в разных частях тела, возможно уменьшить жировые отложения и устранить целлюлит.

ГАРАНТИЯ

ФИО покупателя _____

Телефон _____

Адрес(покупателя) _____

Дата покупки ____/____/____

Адрес центра _____

Телефон(центра) __ () _____

МП

Подпись _____

Индикаторы


Данный массажер особо нужен для людей среднего возраста, людей, ведущих малоподвижный образ жизни, а также спортсменам – для снятия нагрузки и напряжения мышц после тренировок.

Использование

С помощью данного оборудования массажное воздействие можно осуществить в любой части тела:



Управление

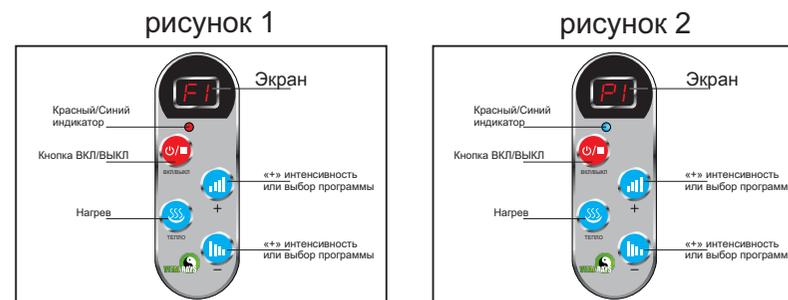

1. После подключения, следует звуковой сигнал; Нажмите кнопку «ВКЛ», (в выключенном состоянии только кнопка «ВКЛ» будет работать). В обычном состоянии, загорается красный индикатор, циферблат показывает "F1", начнется массаж (при включении массажера будет работать первая программа, с первым уровнем интенсивности); Быстрым нажатием (без удерживания) кнопки «ВКЛ» можно изменить режим и интенсивность; При выборе интенсивности загорается красный индикатор, нажатием кнопок «+» и «-» можно выбрать нужную интенсивность из 9 уровней (F1-F9); При выборе программы, загорается синий индикатор, нажатие кнопок «+» и «-» можно выбрать нужную программу (P1-P39)

2. Нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ»(более 3 секунд), для выключения;
3. Для включения функции тепла, нажмите кнопку «тепло», кнопка начнет моргать, для отключения функции нажмите кнопку «тепло» еще раз.
4. При работе массажера нажатие любой кнопки будет сопровождаться звуковым сигналом;
5. При работе массажера, и в случае когда кнопки не нажимаются более 3 секунд, на экране включается оставшееся время сеанса.

Предупреждение:

1. Не использовать аппарат во влажных помещениях.
2. Хранить аппарат в недоступном для детей месте.
3. В случае любой неисправности аппарата, обратитесь в ближайший демонстрационный центр.
4. В случае поломки, не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно, так как это может привести к травмам или потере гарантии

ВНИМАНИЕ

1. Проконсультируйтесь с врачом, если вы принимаете какие либо медицинские препараты особого воздействия.
2. Людям, страдающим следующим заболеваниями, стоит проконсультироваться со специалистом перед началом сеанса: тяжелые сердечные заболевания, опухоль, деформированный позвоночник, остеопороз, кардиостимулятор, а также во время беременности.
3. Встроенные электромагниты во время работы нагреваются, поэтому, в случае перегрева, дайте время аппарату охладиться перед использованием.

Гарантия:

1. Просьба хранить гарантийный талон;
2. Компания предоставляет один год бесплатного гарантийного обслуживания с учетом правильного использования с момента покупки. Если аппарат используется в коммерческих целях, срок гарантии сокращается до 6 месяцев.

Случаи, которые не подлежат бесплатному гарантийному обслуживанию:

1. Повреждения или неисправности, вызванные небрежным обращением;
2. Повреждения или неисправности, вызванные попытками разобрать или отремонтировать аппарат самостоятельно;
3. Истек год бесплатного гарантийного обслуживания;
4. Гарантийный талон не соответствует товару;
5. Гарантийный талон отсутствует;
6. В случае форс-мажора (наводнение, землетрясение, пожар, и.т.д)

Фотографии представлены в качестве образца, фактические размер и внешний вид аппарата может отличаться.